



## Intelligent løftesøjle NextGen

Ny opgradering af LiteGait systemet med Smart BiSym-teknologi intelligent løftesøjle som er fuldautomatisk, indstilles efter målsætning og justerer automatisk vægtbæringen i træningen. Den sørger for at patienten er konstant udfordret og aflastet. Alle LiteGaits der bestilles med BiSym har nu den intelligente løftesøjle.

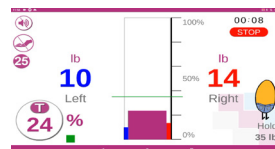


### Balance - stand funktion

Øg/reducér den ydede støtte dynamisk, er vægten under eller over det indstillede mål bevares positionen.

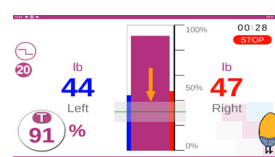

### Automatisk trin support

Justerer automatisk når der trædes op på eller træder ned fra f.eks. løbebåndet. Full support ved Step up og Step Down øvelser.

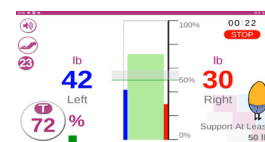

### Konstant dynamisk vægtaflastning

Supporter ikke mere eller mindre, denne funktion øger/sænker automatisk vægtaflastningen. Meget nyttigt iforhold til målsætning for den enkelte patient.

- **Automatisk vægtbæring under hele træningssessionen**
- **Vægtbærende mål fastsættes af terapeuten via BiSym tablet, herefter justeres automatisk belastningen og vægtbæringen.**
- **Træn trin med fuld support, op & ned. LiteGait hjælper f.esk. med at komme op og ned af løbebåndet.**
- **Indstil den ønskede støtte med en procentdel af patientens vægt, og lad Smart Controlleren selv justere efter behov under hele træningssessionen.**
- **Inklusiv adgangskode til at låse Smart BiSym-software.**

Smart Controller er en dobbeltkanals aktuator-kontrolboks til NextGen LiteGait. Den kommer med lavenergi BT-forbindelse til en Android-app, der overvåger og rapporterer batteriets tilstand samt motorbrug og anden diagnostik. Appen tillader styring af aktuatoren trådløst. Sidst, men ikke mindst, gør dette det muligt for Smart BiSym software at tage kontrol over aktuatorpositionen for at hjælpe med at fastholde fastsatte mål ved automatisk at justere vægtaflastningen i henhold til de angivet mål.

