



Intelligent lyftpelare NextGen


Ny uppgradering av LiteGait systemet med Smart BiSym-teknologi intelligent lyftpelaren som är helautomatisk, inställas efter målsättning och justerar automatiskt viktbäringen i träningen. Den säkerställer att patienten är konstant utmanad och avlastad. Alla LiteGait som beställs med BiSym har nu den intelligenta lyftpelaren.

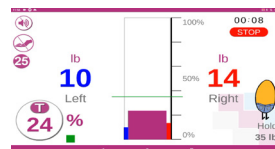

Balans - stå funktion
Öka/minska stödet som tillhandahålls dynamiskt, om vikten är under eller över det inställda målet bibehålls positionen.

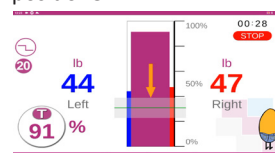

Automatisk steg support
Justerar automatiskt när man kliver på eller kliver ner från t.ex. löpbandet. Fullt stöd för Step up och Step Down övningar.

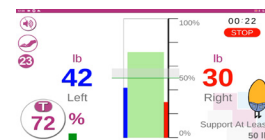

Konstant dynamisk viktavlastning
Stöd inte mer eller mindre, denna funktion ökar/minskar viktavlastningen automatiskt. Mycket användbart när det gäller att sätta mål för den enskilda patienten.

- **Automatisk viktbäring under hela träningssessionen**
- **Viktbärande mål fastställs av terapeuten via BiSym tablet, därefter justeras belastning och viktbäring automatiskt.**
- **Träna steg med full support, upp & ner. LiteGait hjälper t.ex. med att komma upp och ner från löpbandet.**
- **Ställa in den önskade support med en procentdel av patientens vikt, och låta Smart Kontroller själv justera efter behov under hela träningssessionen.**
- **Inklusiv behörighetskod till Smart BiSym-software.**

Smart Controller är en dubbelkanals manöverbox för NextGen LiteGait. Den levereras med lågenergi BT-anslutning för en Android-app som övervakar och rapporterar batteritillstånd samt motoranvändning och annan diagnostik. Appen tillåter styrning av ställdonet trådlöst. Sist men inte minst gör detta att Smart BiSym mjukvaran kan ta kontroll över ställdonets position för att bibehålla inställda mål genom att automatiskt justera viktavlastningen enligt de angivna målen.

