



Skab resultater for dine patienter

REHAB-PARTNER



Vi tilbyder

- Rådgivning inden køb
- Fremvisning hvor vi træner med jer & jeres patienter
- Gratis afprøvning
- Levering & gennemgang/undervisning ved opsætning
- Løbende seminar
- Brush-up i brugen af vores produkter
- Serviceeftersyn

Med gratis afprøvning får I svar på alle Jeres spørgsmål om hvorvidt produkterne er relevante i Jeres genoptræning. Book os til et besøg på tlf: +458680 1807 eller kontakt os via mail: info@rehab-partner.dk

Inden afprøvning og ved køb vil vi gerne at I modtager:

NuStep gennemgang af funktioner og træningsmuligheder af ca. 30 min.

LiteGait undervisning 3 timer med 2-3 af Jeres borgere/patienter.

Løbebånd gennemgang af funktioner ca. 30 min.


IVS3 & IVS4 3 timers undervisning med patienter.

NYHED I DANMARK

Intens Visuel Simulator IVS3® & IVS4®

IVS fremmer hjernens plasticitet, udviklet ud fra de seneste videnskabelige beviser inden for neurovidenskab, i tæt samarbejde med terapeuter og læger. Dessintey står bag udviklingen af de patenterede systemer IVS3 & IVS4, enkle og effektive teknologier indenfor rehabilitering. IVS-teknologi kombinerer tilgange med et højt niveau af klinisk evidens om motorisk restitution og smertebehandling.

Dessintey's IVS3® & IVS4® er en patenteret teknologi til udførelse af visuomotorisk simuleringstræning, baseret på spejlterapi—handlingsobservation—motorik billedprincippet

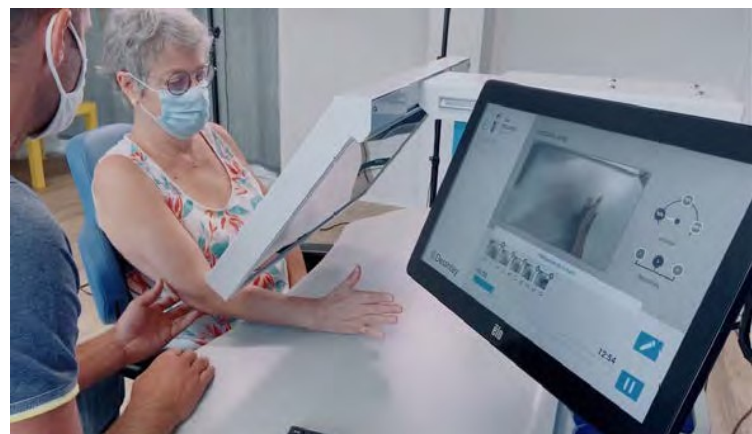

IVS3® vejledende udsalgspris dkk. 350.000,00
-10% i IntroRabat dkk. 315.000,00

Ved køb medfølger 3 timers oplæring med patienter, 2 års garanti og adgang til software opdatering

IVS3® Overekstremitet

IVS3® er baseret på de grundlæggende principper for visuomotorisk simulering uddannelse. Det erstatter billedet af den lammede arm med et positivt billede af bevægelse udført af den raske arm. Genindførelse af sammenhæng mellem, hvad patienten har til hensigt at gøre, og hvad fornemmelser, de opfatter, tilskynder til genlæring.

Syn spiller en væsentlig rolle i det tidlige stadie af rekonstruktion af kropsbillede og motorstyring. Med en intens fordybelse, IVS giver patienten mulighed for at reintegrere de sunde funktionelle lemmer og at fokusere på repræsentation af bevægelse. IVS3® er en unik teknologi dedikeret til motorisk planlægning og central kontrol af bevægelse.

IVS Intens Visuel Simulering Positiv Visuel Feedback Fremmer Genlæring

IVS4® Underekstremitet

Tilpasset til kørestole giver IVS4® patienterne mulighed for at arbejde siddende for at lære grundlæggende bevægelser og mere kompleks koordination, derefter stående for at fokusere på en funktionel tilgang til balance og gang.

IVS4® er baseret på de grundlæggende principper for visuomotorisk simulationstræning. Det erstatter billedet af det lammede ben med et positivt billede af bevægelser udført af det raske ben. Genindførelse af sammenhæng mellem, hvad patienten har til hensigt at gøre, og hvilke fornemmelser, de opfatter, tilskynder til genlæring.

IVS4® vejledende udsalgspris dkk. 420.000,00
10% i IntroRabat dkk. 378.000,00

Ved køb medfølger 3 timers oplæring med patienter, 2 års garanti og adgang til software opdatering



For mange patienter med f.eks. slagtilfælde eller CRPS er handlings-planlægningen ændret eller ikke-eksisterende. De mister bevidstheden om deres egen krop, men også hukommelsen om motoriske funktioner.

"At se en bevægelse er næsten som at udføre den."

REHAB-PARTNER ApS - www.rehab-partner.dk - info@rehab-partner.dk - +458680 1807

*Alle priser er ekskl. moms & levering, her tages forbehold for tastefejl. Kampagnepriserne er gældende til 31.12.2023.

Den amerikansk udviklede NuStep® er en optimal løsning i genoptræningen.

Kombinationen af en siddende crosstrainer og stepmaskine skaber tryghed og sikkerhed for patienten med en træningsform, der udfordrer både styrke, puls og krydskoordinering på det rette niveau.

NuStep® træner kroppen gennem naturlige bevægelser, som styrker både arme, ben, overkrop og ryg. Både for terapeut og patient er det meget tilfredsstillende, at patienterne kan træne sikkert og på egen hånd.



NuStep T4r

fastmonteret fodstraps.

Max bruger vægt 181 kg.

Sædet drejes 360 gr.

Data export via USB.

2 træningsprogrammer

Mål; 152 x 69 x H 115 cm.

Vejl. Udsalgspris dkk. 51.900,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 41.520,00

NuStep T5xr

fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.

Dorsiflex pedaler.

Max bruger vægt 272 kg.

Sædet drejes 360 gr.

Lagring af data op 200 brugere

Data export via USB.

13 træningsprogrammer

2 træningstest programmer

Mål; 182 x 74 x H 117 cm.

Vejl. udsalgspris dkk. 62.900,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 50.320,00

NuStep T6pro

Fastmonteret fodstropper &

Dorsiflex pedaler.

Max bruger vægt 227 kg.

Sædet drejes 360 gr.

Stor touch skærm med interaktive træner

Lagring af data

Data export via USB & bluetooth

Adgang til trænings apps

Mål; 182 x 74 x H 117 cm.

Vejl. udsalgspris dkk. 68.900,00


KAMPAGNEPRIS DKK 55.120,00



WellGrip handsker

DKK 1.495,00


Tilbud DKK 1.196,00

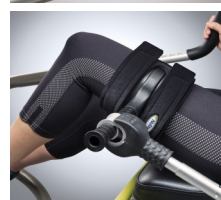

Benstabilisator

DKK 3.500,00

Tilbud DKK 2.800,00

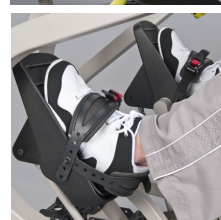

Fodstraps er inkl. på

alle NuStep

Modeller	T4r	T5xr	T6pro
Lav indstigning		X	X
Drejbart sæde 360 gr.	X	X	X
Sæde højde i niveau m. kørestol	X	X	X
Rotation i håndtag		X	X
Quick start uden display aktivering	X	X	X
Interaktivt display / adgang til træning apps			X
Træningspartner	X	X	X
Data eksport via USB (T6pro bluetooth)	X	X	X
Træningsprogrammer	2	13	2
Mulighed for at lagre brugere		X	X
Polar Hjerterefrekvens (T6pro bluetooth)	X	X	X
Max bruger vægt kg	181	272	227

LiteGait® er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, deres patienter, og med udgangspunkt i forskning på området. For alle der arbejder med LiteGait® tilbyder vi personlige samt online træningsseminarer. Samtidig får du adgang til et internationalt forum af terapeuter, der bruger LiteGait® i deres dagligdag. Med LiteGait får du et redskab som udfordrer og udvikler patientens bevægelsesstrategier på præcis det udviklingsniveau hvor patienter befinder sig, uden at det på noget tidspunkt føles utrygt for patienten eller terapeuten.

LiteGait LG900-flex Inkl. NY intelligent BiSym

NYHED intelligent, fuldautomatisk styresystem med biofeedback inkl. tablet

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

2 stk. Bækkensejl inkl. XL forlænger, Q-strap sæt

Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.


Max patient højde 214 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 900 mm.

Vejl. Udsalgspris DKK. 179.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 152.150,00

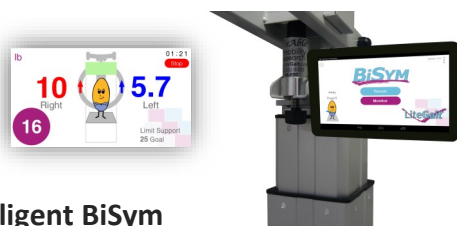

NY intelligent BiSym

Fuldautomatisk styresystem med biofeedback. Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gafflen til tablet, som kan monteres på LiteGait. Fuldautomatisk efter fastsat målsætning, støtter og aflaster dynamisk under hele træningen. Giver et hurtigt og ubesværet overblik for terapeuten og patienten kan følge med på skærmen under træning med direkte feedback. Perfekt til balance & gangtræning.

Kan eftermonteres, kontakt os for at hører nærmere



LiteGait LG800

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

1 stk. bækkensejl

Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.

Max patient højde 200 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 800 mm.

OBS til denne model er BiSym ikke muligt

Vejl. Udsalgspris DKK 135.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 114.750,00

LiteGait LG800

Integreret FreeDome & flexfunktion

Inkl. 3D barre, 1 sejl/seler & Q-straps.

Max patient vægt 150 kg. Max patient højde 213 cm.

Elektrisk højde justering 70 cm. Max højde på enhed 238 cm.

Mulige tilvalg; BiSym, GaiterStool, parrallel barre, 76 eller 86 cm. base.

Vejl. Udsalgspris DKK 89.500,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 76.075,00



Pantenteret bækkensejl til LiteGait,

fås i flere størrelser, Ble-sejl til de mindste, samt kravle-sejl til både voksne & børn. Kontakt os for priser

Rengøringsvenligt og vaskbar.



LiteGait børn

WalkAble giver mulighed for en alsidig & sjov træning af balance, gang og kravle funktion. Til dem der behandler de mindste fra 0 - 154 cm.

WalkAble LG50KX med integreret FreeDome (roterende gaffel 360 gr.)

Inkl. aftagelige Parallel barre & 2 stk. bækkensejl.

Max patient vægt 50 kg. Max patient højde 154 cm.


Elektrisk og manuel højdejustering fra 0-154 cm.

Max højde på enhed 178 cm.

Mulige tilvalg; GaiterStool, Q-straps. Base str. 64, 69 eller 76 cm.

Vejl. Udsalgspris DKK 45.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

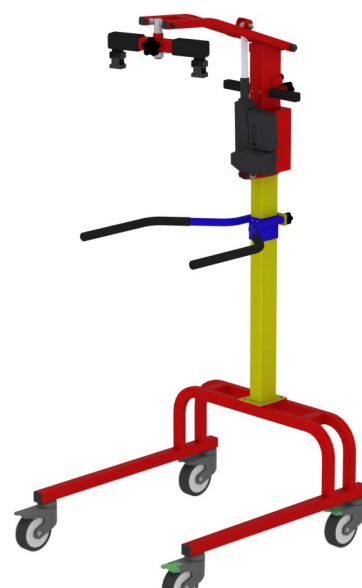

WalkAble™

Løbebåndene er udviklet til rehabilitering, og har derfor en meget brugervenlig opsætning.

GKS22 med aftageligt display og bredde og højde justerbare barre, midterstribе, reverse/baglæns funktion samt langsom start hastighed 0,2 km/t. GaitKeeper® Mini er et lille og kompakt gangbånd med en total vægt på 22,7 kg, hvilket gør det til markedets mindste og mest fleksible gangtræningsbånd. Løbebåndene er ideelle til træning med og uden LiteGait.

GaitKeeper GKS22 løbebånd

Medicinsk løbebånd udviklet til rehabilitering

Lav start 0,2 —16 km/t

Aftagelig display/consol

Justerbar barre™ (patent pending)

Baglæns/reverse 5 km/t

Stigning 0-15%

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 58.000,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 49.300,00



GaitKeeper 21" Mini gangbånd lille kompakt gangbånd

Fjernbetjening til hastighedsjustering

Aftagelige barre

Max bruger vægt 160 kg.

Lav start hastighed 0,2 - 5 km/t.

Str. 107 x 64 cm. Vægt 24 kg.

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 39.500,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 33.500,00

OBS kan kun bestilles med indbygget GaitSens frem til 30.06.2024

GaitSens 2000

Ganganalyse system indbygget i løbebåndet

Data overføres i realtime via Bluetooth

Udlæses vægtbæring, tid og skridt parametre

Indbygget balance modul

Tilkoble BiSym på LiteGait via samme tablet for komplet analyse

Inklusiv software, database med nutids analyse, signal aflæser og rapport generator. Kan indbygges i både GKS2200 og GKMini

Vejl. Udsalgspris dkk. 40.500,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 34.500,00

